

SONICZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Szczoteczka SMILENE została zaprojektowana tak, aby zapewnić Tobie i Twojej rodzinie bezpieczne i efektywne szczotkowanie. Jak w przypadku wszystkich urządzeń elektrycznych, należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, zwłaszcza w obecności dzieci.

Przed użyciem zapoznaj się ze wskazówkami bezpieczeństwa.

NIEBEZPIECZEŃSTWA

Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem:

- △ Po każdym użyciu odłączaj ładowarkę od źródła prądu.
- △ Nie używaj szczoteczki podczas kąpieli.
- △ Nie przechowuj szczoteczki, ani ładowarki w miejscu, z którego mogą spaść lub wpaść do wanny lub umywalki.
- △ Nie zanurzaj w wodzie, ani żadnym innym płynie.
- △ Nie dotykaj ładowarki, jeśli wpadła do wody. Najpierw odłącz ładowarkę od źródła prądu.

OSTRZEŻENIA

Aby uniknąć ryzyka poparzeń, porażenia prądem, pożaru lub uszkodzeń ciała:


- △ Nie zostawiaj ładowarki szczoteczki podłączonej do prądu.
- △ Konieczny jest nadzór osób dorosłych, jeśli szczoteczka używana jest przez lub w obecności dzieci bądź osób niepełnosprawnych.
- △ Używaj szczoteczki wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. Nie używaj akcesoriów, które nie są rekomendowane przez producenta.
- △ Nie używaj szczoteczki, jeśli kabel lub wtyczka są uszkodzone; jeśli szczoteczka została uszkodzona lub wpadła do wody. Skontaktuj się z serwisem.
- △ Nie przechowuj kabla blisko nagranych powierzchni.
- △ Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów szczoteczki bądź przewodu.
- △ Nie używaj szczoteczki na dworze, ani w miejscach, gdzie używane są produkty w aerozolu bądź podawany jest tlen.
- △ Podłącz ładowarkę szczoteczki do prawidłowo uziemionego gniazdka. Patrz instrukcja uziemienia.

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ
TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO

PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ PONIŻSZE INFORMACJE:

- Szczoteczka nie posiada żadnych części, które mogą być naprawiane przez użytkownika.
- Ładowarkę przechowuj w suchym i bezpiecznym miejscu, jeśli nie jest używana.
- Przed użyciem rozprostuj kabel.
- Jeśli urządzenie nie działa, nie rozkręcaj ani nie wymieniaj żadnej części szczoteczki; w przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem. Skontaktuj się z serwisem.
- Jeśli kabel jest uszkodzony, musi być wymieniony przez producenta, aby uniknąć niebezpieczeństwa. Skontaktuj się z serwisem.
- Jeśli szczoteczka zostanie upuszczona, główka szczoteczki powinna być wymieniona przed następnym użyciem, nawet jeśli nie widać śladów zniszczenia.

OPIS URZĄDZENIA

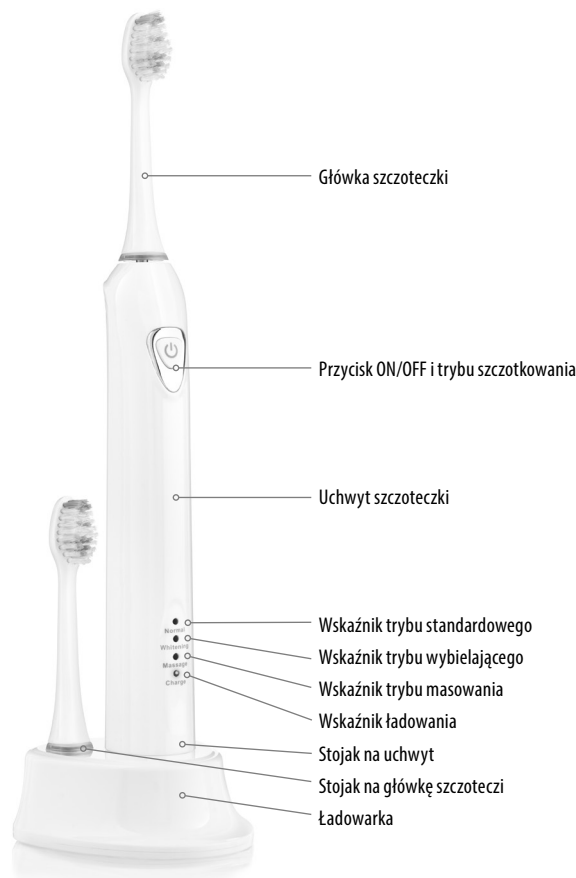

PODŁĄCZENIE I ŁADOWANIE

- Szczoteczka SMILENE posiada wodoodporny uchwyt. Może być używany w łazience, ale nie pod wodą.
- Podłącz ładowarkę do gniazdka i odłóż uchwyt szczoteczki na ładowarkę.
- Wskaźnik ładowania powinien się świecić. Pełne ładowanie zajmuje ponad 24 godziny i umożliwia ok. 6 tygodni regularnego szczotkowania.
- W przypadku codziennego użytkowania uchwyt szczoteczki należy odkładać na ładowarkę, aby utrzymać pełny stan naładowania.
- Nie istnieje ryzyko nadmiernego naładowania.

UŻYCIE SZCZOTECZKI SMILENE

Nałóż główkę szczoteczki na uchwyt. Możesz użyć dowolnej pasty do zębów.

Aby uniknąć rozchlapywania pasty, włóż główkę szczoteczki do jamy ustnej przed włączeniem.

TECHNIKA SZCZOTKOWANIA:

- Powoli szczotkuj kolejno wszystkie zęby.
- Zatrzymaj szczoteczkę na każdym zębie przez kilka sekund.
- Szczotkuj również dziąsła, najpierw zewnętrzne potem wewnętrzne, a na końcu powierzchnie żujące.
- Nie naciskaj zbyt mocno ani nie szoruj, po prostu pozwól szczoteczce wykonać całą pracę.

TRYBY SZCZOTKOWANIA

Szczoteczka SMILENE posiada trzy różne tryby szczotkowania:

- Standardowy – wyjątkowo dokładne czyszczenie;
- Tryb Wybielający – wybielanie dzięki najszybszym drganiom szczoteczki (41.000 drgań/min.).
- Masaż – delikatna stymulacja dziąseł.

DWUMINUTOWY AUTOMATYCZNY MINUTNIK

Szczoteczka SMILENE została zaprojektowana, aby zapewnić najsukuteczniejszy czas szczotkowania. Po 2 minutach pracy szczoteczka wyłącza się automatycznie.

Wyłączanie/włączanie i tryby szczotkowania zmienia się za pomocą przycisku ON/OFF. Po włączeniu przyciskanie go zmienia kolejno tryby – Standardowy, Wybielający, Masaż, wyłączenie.

Po włączeniu szczoteczki SMILENE automatycznie uruchamia się tryb Standardowy.

Aby włączyć tryb Wybielający, naciśnij ponownie przycisk ON/OFF.

Aby włączyć tryb Masaż, naciśnij ponownie przycisk ON/OFF.

Po naciśnięciu przycisku ON/OFF zapali się wskaźnik trybu szczotkowania, który

wskazuje, jaki tryb jest aktualnie włączony.

Aby wyłączyć szczoteczkę, naciśnij przycisk ON/OFF. Jeśli włączony jest tryb Standardowy, naciśnij przycisk trzy razy, aby wyłączyć urządzenie. Jeśli włączony jest tryb Wybielający, naciśnij przycisk dwa razy. Jeśli włączony jest tryb Masaż, naciśnij przycisk jeden raz.

CZYSZCZENIE

- Po użyciu dokładnie wypłucz główkę szczoteczki pod bieżącą wodą.
- Zdejmij główkę szczoteczki z uchwytu i umyj obie części osobno pod bieżącą wodą. Wytrzyj obie części do sucha, zanim podłączysz do ładowarki.
- Przed wyczyszczeniem ładowarki, odłącz ją od źródła zasilania. Do czyszczenia powierzchni ładowarki używaj wyłącznie suchej lub lekko wilgotnej ściereczki.

Ważne: Nie wkładaj ładowarki do wody lub pod bieżącą wodę.

- Odłóż ładowarkę w suche i bezpieczne miejsce.
- Nie podłączaj ładowarki, dopóki nie jest całkiem sucha.

Niniejszy produkt zawiera akumulatora w celu ochrony środowiska.

UTYLIZACJA I OBJAŚNIENIA SYMBOLI

UTYLIZACJA NIEPOTRZEBNEGO SPRZĘTU PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW DOMOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ



Obecność tego symbolu na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że nie można pozbyć się tego produktu w taki sam sposób jak odpadów z gospodarstw domowych. W związku z tym jesteście Państwo odpowiedzialni za utylizację zużytego sprzętu i jesteście zobowiązani dostarczyć go do autoryzowanego punktu recyklingu niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sortowanie, usuwanie i recykling zużytego sprzętu przyczyni się do ochrony zasobów naturalnych i zapewnia, że recykling odbywa się według zasad poszanowania zdrowia ludzkiego i środowiska. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów zbiórki zużytego sprzętu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami bądź z lokalnym punktem utylizacji odpadów domowych.

Produkt posiada certyfikat CE



GWARANCJA

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją liczoną od daty zakupu w przypadku uszkodzeń materiału lub produkcji. W ramach gwarancji uszkodzone elementy zostaną za darmo wymienione na nowe lub naprawione. Gwarancja nie obejmuje dostarczanych wraz z urządzeniem akcesoriów oraz części podlegających naturalnemu zużyciu. Urządzenie może być naprawiane wyłącznie przez autoryzowany serwis.

Urządzenie należy przesłać do serwisu w celu naprawy w ciągu 8 dni od stwierdzenia usterki. Koszty transportu pokrywa użytkownik. Naprawy nie objęte warunkami gwarancji pokrywa użytkownik. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub uszkodzeń powstałych nie z winy producenta (upadek, nieprawidłowy transport). Gwarancja nie przewiduje żadnej rekompensaty za szkody, pośrednie lub bezpośrednie, wyrządzone osobom bądź urządzeniom, gdy urządzenie nie działało. Gwarancja jest ważna od dnia zakupu potwierdzonego rachunkiem bądź fakturą, które należy dołączyć do karty gwarancyjnej. Brak poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej uprawomocnionej rachunkiem jest jednoznaczne z utratą gwarancji.

Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, prosimy o kontakt z DZIAŁEM OBSŁUGI KLIENTA NOVAMA w Polsce.

KARTA GWARANCYJNA	DANE KUPUJĄCEGO				Podpis potwierdzający akceptację warunków gwarancji
	Data zakupu	Imię i nazwisko	Adres	Numer telefonu	
					Podpis i pieczęćka sprzedawcy

DISTRIBUTED BY / DYSTRYBUTOR:

Novamed Sp. z o.o.
ul. Traktorowa 143; 91-203 Łódź, Poland
Hotline: 801 011 707

Made in China / Wyprodukowano w Chinach
for / dla Novamed Sp. z o.o.

novamed®